

Instructie BiliCocoon



Sluit de mat goed op de lichtbak aan door de aansluiting van de mat in de aansluiting van de lichtbak te steken. Zorg dat de kabel niet verbogen of uitgerekt zijn.



Plaats de BiliCocoon Disposable op een plat oppervlak. Zorg dat de lange kant van de mat onder ligt, zie de rode streep.



Plaats het verlichtingsoppervlak van de mat met het label in de opening van de disposable zijde welke voorzien is van het fixatie deel voor het kind.




Belangrijk: doe deze nooit in de voorste deel van de wegwerpzak.



Plaats het tweede verlichtingsoppervlak van de mat in de opening van het voorste deel en schuif nu de disposable hoes over beide matten gelijkmatig naar beneden tot aan de rand van de hoes.



De BiliCocoon is nu klaar om te gebruiken, zorg dat de kabel niet gedraaid is en dat de lichtbak op een stabiele plek staat of met de klem hangt (zie laatste foto z.o.z.).

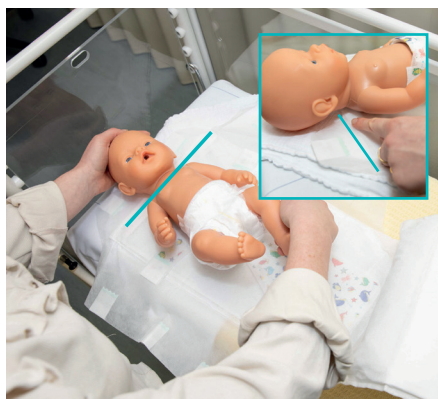

Leg het kind op de disposable hoes en gebruik de aangegeven neklijn voor de juiste positie.



Maak daarna de buikflap vast en vouw het overtollige deel naar beneden. **Belangrijk:** het kind dient altijd een luier te dragen.



Geboortezorg

ST ANTONIUS
een santeon ziekenhuis



Sluit de schouder door middel van de klittenband.



Sluit de zijkenen ook met de klittenband aan weerszijden.



Sluit de BiliCocoon kruislings onderaan met de klittenband



Zorg dat de kabel vrij hangt over de wieg of ledikant. Trek nooit aan de witte huls van de kabel. Plaats de lichtbak op een veilige plek.



1: Zet de lichtbron aan met de ON/OFF schakelaar.
3&4: Stel de sessietijd (HH:MM) in met de + en - knoppen.
5: Als er al een tijd is ingesteld hoeft je niks te doen. Als de sessie begint, worden alle bedieningsknoppen inactief. Om de therapie tussentijds te onderbreken dien je de lichtbron uit te schakelen.



Leg het kind op zijn rug in bed , hierbij hoeft hij geen brilletje op.



Wanneer het kind te warm wordt doe dan de zijflappen open. Zorg ervoor dat het kind dan wel een brilletje draagt ter bescherming van de ogen.



Je kunt jouw kind bij je nemen terwijl het in de BiliCocoon ligt.



Gebruik de ophanghaak voor de lichtbak aan bijvoorbeeld een bedje.



Geboortezorg

ST ANTONIUS
 een santeon ziekenhuis